



MANUAL

Standard-, Leichtgewichts-, Multifunktionsrollstühle

MANUELLE ROLLSTÜHLE



TECHNISCHE DATEN
AUF EINEN BLICK AB SEITE 22

STANDARD- FALTROLLSTÜHLE

 MEYRA®



AB SEITE 8
**SERVICE
LAGERVARIANTE**
3.600



AB SEITE 9
**BUDGET
LAGERVARIANTE**
9.050

LEICHTGEWICHTS- ROLLSTÜHLE

 MEYRA®



SEITE 10
**HM303D
LAGERVARIANTE**
7.010



SEITE 11
**HM03MS
LAGERVARIANTE**
7.010



SEITE 12
**FORMAT
LAGERVARIANTE**
3.940



SEITE 13
**EUROCHAIR²
LAGERVARIANTE**
2.750



SEITE 16
EUROCHAIR² PRO
2.850



SEITE 17
**EUROCHAIR
LAGERVARIANTE**
1.750

MULTIFUNKTIONS- ROLLSTÜHLE

 MEYRA®



SEITE 18
**SOLERO LIGHT
LAGERVARIANTE**
9.072

XXL- ROLLSTÜHLE

 MEYRA®



SEITE 20
EUROCHAIR² XXL
2.850



SEITE 21
EUROCHAIR² HD
2.850

DAS MEYRA-SIEGEL
FÜR INDIVIDUALITÄT



MY INDIVIDUAL



Mehr Infos:
www.meyra.de/my-individual

Individuelle Lösungen für besondere Anforderungen – In unserem Bestreben, jedem Menschen Mobilität zu gewährleisten, haben maßgeschneiderte Produktlösungen seit jeher einen besonderen Stellenwert bei MEYRA. So personenbezogen die Anforderungen sind, so individuell entwickeln wir Lösungen. Ob für besonders kräftige Personen mit bis zu 300 kg Körpergewicht oder Personen mit bestimmten Einschränkungen des Bewegungsapparates – wir realisieren die passende Lösung, ganz auf das jeweilige Handicap zugeschnitten.

Mit einem hochqualifizierten Team, das ausschließlich für individuelle Lösungen zuständig ist, haben wir den INDIVIDUAL-Bereich im Laufe der letzten Jahre noch weiter ausgebaut. Mehrere Tausend Individuallösungen sind so neben der Serienfertigung entstanden. Jedes Anliegen wird in Kooperation mit Therapeuten und Orthopädietechnikern im Detail geplant und von unserem Fertigungsteam, bestehend aus Ingenieuren und Technikern, professionell realisiert. Gefertigt mit modernen CAD-Anlagen – für gewohnte MEYRA-Qualität.

BESTELLUNG LEICHT GEMACHT:



JETZT ANFRAGEN:
INFO@MEYRA.DE

GARANTIEZEITEN & ISO ZERTIFIZIERUNGEN

GARANTIEBEDINGUNGEN MANUELLE ROLLSTÜHLE

Voraussetzung für die Garantie auf Rahmen und Schere ist der bestimmungsgemäße Gebrauch des Rollstuhls, der eine regelmäßige, fachgerechte Wartung impliziert. Insbesondere sind Beschädigungen durch gelöste Schrauben oder Muttern sowie ausgearbeitete Befestigungsbohrungen der Sitz- und Rückengurte durch häufig gewechselte Bezüge auszuschließen. Weiterhin dürfen keine Veränderungen an tragenden Teilen vorgenommen worden sein.

Ausgenommen von den Garantieleistungen sind Beschädigungen der Oberfläche, hier insbesondere Lackkratzer oder andere mechanische Oberflächenbeschädigungen sowie Verunreinigungen.



ANMERKUNG

Der Begriff „zugelassenes Nutzergewicht“ ist deutlich zu unterscheiden vom Begriff „zulässiges Gesamtgewicht“ eines Rollstuhles, was gleichbedeutend ist mit der Summe aus:

- a) zugelassenes Nutzergewicht
- b) Eigengewicht des Rollstuhles
- c) Zuladung

| MODELLTYP | MODELL-NR | ZUGELASSENES NUTZERGEWICHT | ISO 10542-2 | ISO 7176-19 | HMV-NR | GARANTIE AUF RAHMEN & SCHERE* |
|--|-----------|----------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------------------------|
| SERVICE Lagervariante | 3.600 | 120 kg | - | - | 18.50.02.0006 | 3 Jahre |
| BUDGET Lagervariante | 9.050 | 130 kg | - | ✓ | 18.50.02.0117 | 3 Jahre |
| HM303D Lagervariante | 7.010 | 110 kg | - | - | - | 1 Jahr |
| HM03MS Lagervariante | 7.010 | 100 kg | - | - | - | 1 Jahr |
| FORMAT Lagervariante | 3.940 | 130 kg | - | ✓ | 18.50.02.2092 | 3 Jahre |
| EUROCHAIR² Lagervariante | 2.750 | 130 kg | - | ✓ | 18.50.02.2122 | 3 Jahre |
| EUROCHAIR² PRO | 2.850 | 130 kg | - | ✓ | 18.50.02.2123 | 4 Jahre |
| EUROCHAIR² XXL | 2.850 | 160 kg / 200 kg | - | ✓ | 18.50.02.3039 | 3 Jahre |
| EUROCHAIR² HD | 2.850 | 300 kg | - | - | - | - |
| EUROCHAIR Lagervariante | 1.750 | 130 kg | - | ✓ | 18.50.02.2085 | 3 Jahre |
| SOLERO LIGHT Lagervariante | 9.072 | 130 kg | - | ✓ | 18.50.02.7024 | 3 Jahre |

MEYRA-QUALITÄT

TESTSTRECKEN & CRASH-TESTS

Alle Rollstühle werden auf einer Teststrecke umfassend geprüft. Erst nach erfolgreichem Abschluss der internen Qualitätsprüfungen wird ein Rollstuhl zur Auslieferung freigegeben. Zusätzlich wird bei neuen Modellen vor Markteinführung ein Crash-Test durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Rollstuhl als Ersatz für einen KFZ-Sitz genutzt werden kann. Mehr zum Thema Crashtest finden Sie auf unserer Website: www.meyra.de/infozentrum/crash-test

DER MEYRA-HÄRTETEST

MEYRA testet über den Standard der Normen hinaus. Es werden Stress- und Zuverlässigkeitstests bei uns mit erhöhter Belastung über den normativ vorgeschriebenen Standard hinaus durchgeführt. Das ist einzigartig und gewährleistet die Einhaltung unseres hohen Qualitätsanspruchs an unsere Rollstühle.

| DAS IST GEFORDERT: | SO TESTEN WIR: |
|---|---|
| Double-Drum Test nach gesetzlicher Norm DIN EN 21856 DIN EN 12183 | Double-Drum Test nach gesetzlicher Norm und zusätzliche MEYRA-Testverfahren ISO 7176-8 |
| 200.000 Lastwechsel | 200.000 – 300.000 Lastwechsel |
| ohne Überlast | mit 10 % Überlast |
| - | zusätzlicher Stresstest |



KRANKHEITSBILDER & FUNKTIONALITÄTS- ANSPRUCH



KRANKHEITSBILDER

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Schädel-Hirn-Trauma MS, ALS, schwere Demenz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schlaganfall Parkinson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beinamputation bei degenerativen Erkrankungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Geriatrischer Formenkreis Langzeitversorgungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Adipositas mit Folgeerkrankungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zustand nach OP oder Traumen Kurzzeit- Versorgungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Geriatrischer Formenkreis Kurzzeitversorgungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Klinik- und Einrichtungseinsatz für Transfer und Kurzzeitversorgungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | SERVICE 3.600 Lager- variante | BUDGET 9.050 Lagervariante | FORMAT 3.940 Lagervariante | EUROCHAIR 1.750 Lagervariante | HM303D 7.010 Lagervariante | HM03MS 7.010 Lagervariante | EUROCHAIR ² 2.750 Lagervariante | EUROCHAIR ² PRO 2.850 | EUROCHAIR ² XXL 2.850 | EUROCHAIR ² HD 2.850 | SOLERO LIGHT 9.072 Lagervariante | |
| FUNKTIONALITÄTSAN- SPRUCH IN DEN VERSCHIEDENEN MEDIZINI- SCHEN FACHGEBIETEN | Standard | Standard Leichtgewicht | Standard Leichtgewicht | Standard Leichtgewicht | Standard Leichtgewicht | Standard Leichtgewicht | Standard Leichtgewicht | Standard Leichtgewicht | Standard Leichtgewicht | Standard Leichtgewicht | Standard Leichtgewicht | Standard Leichtgewicht |
| Palliativmedizin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Geriatric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neurologie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Orthopädie, Traumatologie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Innere Medizin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |




WEITERE INFORMATIONEN
UNTER WWW.MEYRA.DE ODER BEI IHREM
FACHHÄNDLER IN IHRER NÄHE

GLEICHTEILE

TEILEKOMPATIBILITÄT

Hohe Wirtschaftlichkeit durch maximale Teilekompatibilität – dieser Gedanke steckt hinter dem MEYRA Baukastensystem. In der EUROCHAIR-Familie ist dies bereits ein fester Bestandteil und auch im restlichen Manual-Bereich hat sich das Baukastensystem etabliert. Die große Gleichheit der in unseren Rollstühlen verbauten Einzelseiten garantiert zudem eine höhere Flexibilität und einen minimalen Lagerbestand.

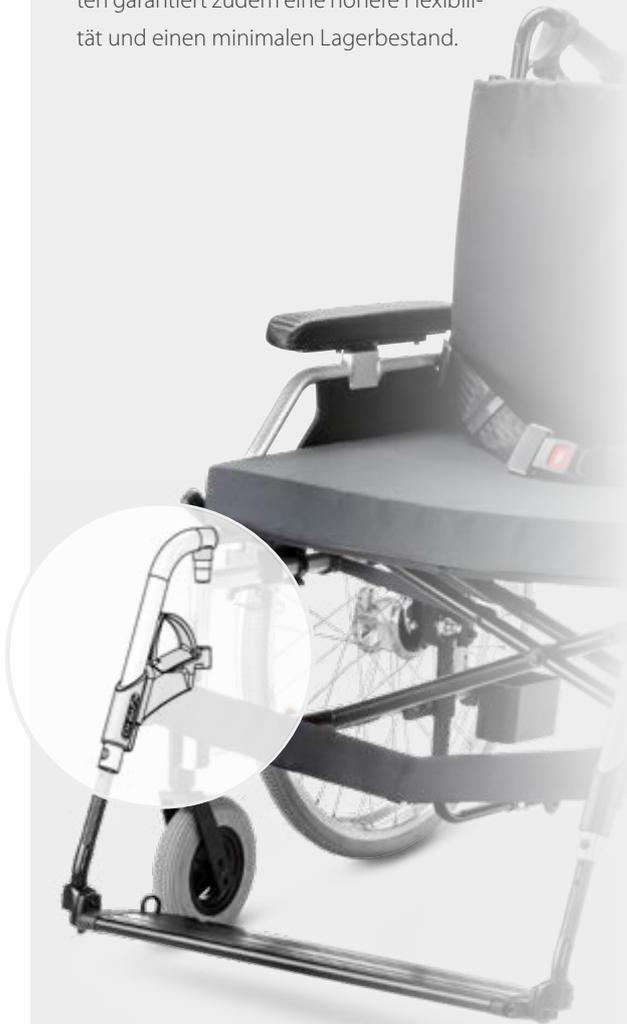

BAUTEILE

Seitenteil, Standard

Seitenteil, hvst

Druckbremse

Bremshebelverlängerung

Trommelbremse²⁾

Fußraste

Fußraste hochschwenkbar

Amputationsbeinstütze

Rückenrohr

Rückenbespannung

Sitzbespannung¹⁾

Kreuzstrebe

Lenkräder

Antriebsräder

Stützrollen

Therapietisch

Therapietisch, halbseitig

Gehhilfenhalter

Haltegurt

passive Beleuchtung

Speichenschutz



| SERVICE Lager- variante 3.600 | BUDGET Lager- variante 9.050 | FORMAT Lager- variante 3.940 | EUROCHAIR Lager- variante 1.750 | EUROCHAIR² Lager- variante 2.750 | EUROCHAIR² PRO 2.850 | EUROCHAIR² XXL 2.850 | SOLERO LIGHT Lager- variante 9.072 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---|-------------------------|-------------------------|---|
| - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | bis SB 53 cm | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

¹⁾ Modelle 1.XXX nutzen dünnere Befestigungsschraube
²⁾ ggf. unterschiedliche Aufnahme

SERVICE LAGER- VARIANTE 3.600

HMV-Nr. 18.50.02.0006

NUTZERPROFIL

- ✓ Geriatrische Versorgung
- ✓ Rheuma
- ✓ Als Transport- oder Schiebehilfe in Krankenhäusern, Kliniken und Pflegeheimen
- ✓ Für den kurzzeitigen Einsatz im häuslichen Bereich oder nach Unfallverletzungen
- ✓ Transport von mobilitätseingeschränkten Gästen, z. B. im Hotel
- ✓ Als Gehilfe (im Rollstuhl sitzend gehen)

FÜR DEN UNIVERSELLEN EINSATZ

Der SERVICE ist sehr gut für den nicht dauerhaften Einsatz (z.B. nach einer OP) als Transport- und Mobilitätshilfe geeignet.

- Anpassungsmöglichkeiten an die Körpermaße des Nutzers
- Umfangreiches Zubehör
- Leichtgängige Faltbarkeit durch Scherenführungsrohre, dadurch hochwertiges Faltsystem mit langer Lebensdauer und guter Parallelführung der Seitenrahmen
- Greifreifen-Antrieb/Schiebebetrieb
- Seitenteile, Armlehnen und Beinstützen abnehmbar
- Kniehebelbremse
- Klinikvariante in Chrom verfügbar
- PU-Armlehnen für Therapietisch geeignet



Lenkrad pannensicher
200 x 50 mm



Beinstützen abnehmbar,
wegschwenkbar



Seitenteil vorn abge-
schrägt mit gepolster-
ter Armauflage



Greifreifen Alu mit 15 mm Abstand

Sitzhöhe vorne / hinten: 520 mm / 490mm
Sitztiefe: 440 mm

Rahmenfarbe Chrom oder Silverline



Nutzer-
gewicht bis
120 kg



Rollstuhl-
Leergewicht
ab 18,5 kg



Sitzbreiten
von
400 – 510 mm



BUDGET LAGER- VARIANTE 9.050

HMV-Nr. 18.50.02.0117

NUTZERPROFIL

- ✓ Schiebe-Greifreifenantrieb
- ✓ Rheuma
- ✓ Geriatrische Versorgung.

WIRTSCHAFTLICH UND INNOVATIV

Der BUDGET ist durch sein einfaches Handling im Alltag gut für den häuslichen und stationären Bereich geeignet.

- Vordere Sitzhöhe ist ohne Austausch von Komponenten variabel
- Komfortentnahmefunktion des Seitenteils
- Serienmäßige Radstandverlängerung mit einmaliger Optimierung der Manövrierbarkeit für Begleitperson
- Faltbar
- Greifreifen-Antrieb/Schiebebetrieb
- Beinstützen nach innen und außen abschwenkbar, winkelverstellbare Fußplatten
- Verriegelbare Armlehnen, nach hinten abklappbar
- Alle Antriebsräder inkl. Steckachse, Auftrittshilfe serienmäßig
- Druck- oder Trommelbremse für Begleitperson (Option)



Kniehebelbremse



Verriegelbare
Armlehnen nach
hinten abklappbar



Beinstützen abnehmbar,
wegschwenkbar



Rücken mit Lumbalnack



Komfortentnahmefunktion des
Seitenteils



Vordere Sitzhöhe einstellbar ohne
Teiletausch. Sitzhöhe vorne / hinten:
470 – 510 mm / 440 – 490 mm
Sitztiefe: 430 mm



Rahmenfarbe Silverline



Nutzer-
gewicht bis
130 kg



Rollstuhl-
Leergewicht
ab 19,6 kg



Sitzbreiten
von
380 – 510 mm



HM303D LAGER- VARIANTE 7.010

NUTZERPROFIL

- ✓ Als Transport- oder Schiebehilfe in Krankenhäusern, Kliniken und Pflegeheimen
- ✓ Für den kurzzeitigen Einsatz im häuslichen Bereich
- ✓ Transport von mobilitätseingeschränkten Gästen, z. B. im Hotel

KOMPAKT UND LEICHT ZU TRAGEN - PRODUKTGEWICHT KOMPLETT MONTIERT: NUR 10 KG

Das Produkt ist ein leichter, faltbarer Rollstuhl, mit nur 10 kg Gesamtgewicht, der dank seiner Dual-Bremskontrolle zusätzliche Sicherheit bietet. Er verfügt über 22-Zoll-Räder mit Steckachse, abnehmbar, die den Transfer erleichtern sowie die Lagerung und den Transport komfortabler machen. Die wegschwenk- und abnehmbaren Beinstützen bieten mehr Bewegungsfreiheit. Das geringe Gewicht des Rollstuhls ermöglicht es dem Nutzer, ihn problemlos zu tragen und einfach ins Auto zu heben. Er lässt sich durch das Faltsystem und den abklappbaren Rücken leicht transportieren. Ideal für unterwegs und für Nutzer, die nach Unabhängigkeit und Flexibilität suchen.

- Rahmenfarbe: mattschwarz
- Tragbar
- Duales Bremssystem
- Transport Rollstuhl



Beinstützen abnehmbar,
wegschwenkbar



Duales Bremssystem



Rückentasche

Faltbarer Rücken

Antriebsräder 22"



Nutzer-
gewicht bis
110 kg



Rollstuhl-
Leergewicht
nur 10 kg



Sitzbreite von
450 mm

HM03MS LAGER- VARIANTE 7.010

NUTZERPROFIL

- ✓ Als Transport- oder Schiebehilfe in Krankenhäusern, Kliniken und Pflegeheimen
- ✓ Für den kurzzeitigen Einsatz im häuslichen Bereich
- ✓ Transport von mobilitätseingeschränkten Gästen, z. B. im Hotel

DER SUPERLEICHTE, FALTBARE TRANSPORT-ROLLSTUHL WIEGT NUR 9,6 KG

Dieser Rollstuhl ist leicht, faltbar und ideal für den Transport, mit einem Gewicht von nur 9,6 kg. Er verfügt über kleine 12"-Antriebsräder und bietet auch ein duales Bremssystem für den Nutzer und die Begleitperson. Er ist speziell für die individuellen Bedürfnisse bestimmter Personen entwickelt. Mit hochschwenkbaren Beinstützen und Armlehnen und faltbarem Rücken für ein kleines Packmaß. Der Rollstuhl bietet einfache Manövrierfähigkeit und Stabilität. Perfekt für diejenigen, die Mobilität und Flexibilität in einem kompakten Format suchen.

- Rahmenfarbe: marineblau
- Tragbar
- Duales Bremssystem
- Transport Rollstuhl



Hochschwenkbare
Beinstützen



Hochschwenkbare
Armlehnen



Stabile Kreuzstrebe



Faltbarer Rücken

Antriebsräder 12"



Nutzer-
gewicht bis
100 kg



Rollstuhl-
Leergewicht
nur 9,6 kg



Sitzbreite von
450 mm

FORMAT LAGER- VARIANTE 3.940

HMV-Nr. 18.50.02.2092

NUTZERPROFIL

- ✓ Häuslicher und stationärer Bereich
- ✓ Geriatrische Versorgung
- ✓ Rheuma

DIE QUALITÄTSALTERNATIVE FÜR DEN WIEDEREINSATZ

Der FORMAT eignet sich hervorragend für den Einstieg in die eigene Mobilität. Bei erhöhtem Anpassbedarf des Nutzers unterstützt der FORMAT beim Aufstehen und Transfer, da die Sitzhöhe auf die Körpergröße abgestimmt werden kann.

- Faltbar
- Hochwertiger Anpassrücken
- Höhenverstellbare Schiebegriffe
- Höhenverstellbare Seitenteile.
- Beinstützen nach innen und außen abschwenkbar
- Anpassbare Sitzhöhe
- Höhenverstellbare, verriegelbare Armlehnen nach hinten abklappbar, hinter dem Rücken einklappbar
- Alle Antriebsräder inkl. Steckachse
- Kniehebelbremse oder Trommelbremse für Begleitperson (Option)
- Winkelverstellbare Fußplatte, Auftrittshilfe und Radstandverlängerung serienmäßig
- Anbindung an das MEYRA-Baukastensystem der EUROCHAIR-Familie



Höhenverstellbare Schiebegriffe serienmäßig



Höhenverstellbare Seitenteile serienmäßig



Sicherheitspaket (optional): passive Beleuchtung, Stützrollen, Sicherheitsgurt, Stockhalter



Höhenverstellbare Schiebegriffe serienmäßig

Hochwertiger Anpassrücken serienmäßig

Höhenverstellbare Seitenteile serienmäßig

Sitzhöhe vorne / hinten:
470 – 510 mm / 440 – 490 mm
Sitztiefe: 400 – 430 mm

Antriebsrad 24" Alu

Beinstützen abnehmbar, wegschwenkbar



Nutzer-
gewicht bis
130 kg



Rollstuhl-
Leergewicht
ab 17,5 kg



Sitzbreiten
von
380 – 510 mm



EUROCHAIR² LAGER- VARIANTE 2.750

HMV-Nr. 18.50.02.2122

NUTZERPROFIL

- ✓ Für den dauerhaften Alltagsgebrauch
- ✓ Für die optimale Versorgung von zahlreichen Krankheiten durch hohe Verstellvarianz
- ✓ Vorwiegend häuslicher Einsatz, aber auch in Rehakliniken zum Erreichen therapeutischer Zielen
- ✓ Für große und breite Personen

DAS LEICHTGEWICHT FÜR DEN UNIVERSELLEN EINSATZ

Der EUROCHAIR² fördert die selbständige Mobilität durch feinstufige Anpassung von Sitz, Rückenlehne und Fahrwerk an den Nutzer. Eine einfache Bedienung, bessere Leichtlaufeschaften bei geringen Antriebskräften und ein reduziertes Gewicht erleichtern das Alltagshandling.

- Faltbar und individuell anpassbar
- Seitenteil höhenverstellbar, hochschwenkbar, abschwenkbar, abnehmbar
- Winkelverstellbarer Steuerkopf
- Höhenverstellbares Seitenteil mit tiefeinstellbarer Armauflage
- Anpassrücken
- Umfangreiches Zubehör und schnelle Ersatzteilversorgung durch das MEYRA-Baukastensystem



Sicherheitspaket und Sitzkissen inklusive



Höhenverstellbares Seitenteil mit tiefeinstellbarer Armauflage



Doppelschere in Serie



Sitz- und Rückengurt: Gepolstert, schwarz

Sitzhöhe variabel: 470 – 520 mm
Sitztiefe variabel: 400 – 490 mm

Radstandsverlängerung durch Drehen des Varioblockes nach hinten

Beinstützen abnehmbar, abschwenkbar.
Fußplatten winkelverstellbar, inkl. Einzelwadengurt



Nutzer-
gewicht bis
130 kg



Rollstuhl-
Leergewicht
ab 17,5 kg



Sitzbreiten
von
380 – 530 mm







QUALITATIV.
LANGLEBIG.
MODULAR.

MEYRA®

EUROCHAIR² PRO 2.850

HMV-Nr. 18.50.02.2123

NUTZERPROFIL

- ✓ Vollausstattung für dauerhaften Einsatz
- ✓ Optimale Versorgung von zahlreichen Krankheiten durch hohe Verstellvarianz
- ✓ Vorwiegend häuslicher Einsatz, aber auch In Rehakliniken zum Erreichen therapeutischer Ziele
- ✓ Zum Einsatz bei verschiedensten Antriebsarten
- ✓ HEMI Komponenten

FUNKTIONAL UND INTELLIGENT

Der EUROCHAIR² PRO fördert die selbstständige Mobilität durch feinstufige Anpassung an den Nutzer. Er zeichnet sich aus durch ermüdungsarmes Sitzen über längere Zeit, eine einfache Bedienung von Seitenteilen und Beinstützen und gute Leichtlauf-eigenschaften bei geringen Antriebskräften.

- Seitenteil höhenverstellbar, hochschwenkbar, abschwenkbar, abnehmbar
- Doppelschere in Serie
- Faltbar
- Beinstützen nach innen und außen abschwenkbar
- Armlehnen abnehmbar, nach hinten abklappbar
- Kniehebelbremse oder Trommelbremse für Begleitperson (Option)
- Auftrittshilfe serienmäßig
- Einfache Radstandsverlängerung durch Drehen des Varioblocks
- Sehr gute Abstimmung auf verschiedene Einsatzbereiche, da gleiche Sitzhöhe bei unterschiedlichen Radgrößen einstellbar



Lenkrad 180 mm PU



Höhenverstellbares Seitenteil mit tiefeinstellbarer Armauflage



Radstandsverlängerung durch Drehen des Varioblocks nach hinten



Anpassrücken in Serie



Sitztiefen von 400 – 490 mm
Sitzhöhen variabel



Beinstützen abnehmbar, abschwenkbar.
Fußplatten winkelverstellbar, inkl. Einzelwadengurt



Nutzer-
gewicht bis
130 kg



Rollstuhl-
Leergewicht
ab 17,5 kg



Sitzbreiten
von
300 – 530 mm



EUROCHAIR LAGER- VARIANTE 1.750

HMV-Nr. 18.50.02.2085

NUTZERPROFIL

- ✓ Für den dauerhaften Alltagsgebrauch
- ✓ Für die optimale Versorgung von zahlreichen Krankheiten durch hohe Verstellvarianz
- ✓ Vorwiegend häuslicher Einsatz, aber auch in Rehakliniken zum Erreichen therapeutischer Ziele
- ✓ Für große und breite Personen

INDIVIDUELL ANGEPASST

Der EUROCHAIR verfügt über viele Anpassungsmöglichkeiten ohne Teiletausch und ist daher ideal für die individuelle Anpassung geeignet. Die Antriebsradposition ist horizontal und vertikal verstellbar für noch mehr Flexibilität. Sehr kurze Umbauzeiten, hohe Variabilität durch Nachrüstsätze und geringes Gewicht erleichtern das Alltagshandling.

- Lagervariante
- Optimale Versorgung von zahlreichen Krankheitsbildern
- Hohe Verstellvarianz und individuelle Anpassung
- Servicefreundlich
- Viele Anpassungsmöglichkeiten sind ohne Teiletausch möglich
- Leicht zu transportieren
- Umfangreiches Baukastensystem
- Faltbar



Winkelverstellbarer Steuerkopf, Alu Lenkgabel



Hohe Variabilität durch Nachrüstsätze



Umrüstung schnell und gezielt möglich ohne Teiletausch



Seitenteil hochklappbar, wegschwenkbar und abnehmbar

Sitzhöhe vorne / hinten:
430 – 510 mm / 430 – 530 mm
Sitztiefe: 400 – 460 mm

2 Rahmenfarben zur Auswahl

Beinstützen nach innen und außen abschwengbar, winkelverstellbare Fußplatten



Nutzer-
gewicht bis
130 kg



Rollstuhl-
Leergewicht
ab 15 kg
(mit Druck-
bremse)



Sitzbreiten
von
380 – 530 mm



SOLERO LIGHT LAGER- VARIANTE 9.072

HMV-Nr. 18.50.02.7024

NUTZERPROFIL

- ✓ Geriatrische Versorgung in Senioren- und Pflegezentren sowie im häuslichen Bereich
- ✓ Bei körperlichen Funktionsstörungen, die eine gute, unterstützende Sitzposition erforderlich machen
- ✓ Gute Eignung und Mobilisierung für Selbstfahrer

LEICHTES HANDLING

Die sehr schmale Gesamtbreite des SOLERO LIGHT ist vorteilhaft beim Durchfahren enger Türbreiten oder in beengten Räumen.

- Einfache Bedienbarkeit
- Stufenlose Verstellung des Sitz- und Rückenwinkels
- Druckbremse, optional Trommelbremse
- Montagemöglichkeit sämtlicher Zusatzantriebe
- Schonendes Zurücksetzen und Aufrichten durch Gasdruckfeder-technik
- Kompakte und niedrige Sitzhöhe
- Variable Sitzbreite und Sitztiefenverstellung
- Kopfstütze höhen-, tiefen- und winkelverstellbar
- Armlehnen höhenverstell- und abnehmbar mit Memoryfunktion
- Erhöhte Standsicherheit durch schwerpunktorientierte Rahmenkonstruktion



Armauflage höhen- und tiefenverstellbar



Querliegender Schiebebügel (optional)



Kopfstütze mit verstellbaren Seitenpolstern und Kugelgelenk (optional)



Sitzkantelung von -2 bis +25°

Sitzhöhe mit Sitzpolster: 440 / 520 mm
Sitztiefe: 420 – 480 mm

Beinstützen winkelverstell- und arretierbar, abnehmbar, weg-, hochschwenkbar



Nutzergewicht
130 kg



Rollstuhl-
Leergewicht
ab 38 kg



Sitzbreiten von
430 – 460 mm /
480 – 510 mm





XXL FÜR BESONDERE ANFORDERUNGEN

WEITERE XXL-PRODUKTE
UNTER WWW.MEYRA.DE ODER IN
UNSERER BARIATRIE-BROSCHÜRE.



EUROCHAIR² XXL 2.850

HMV-Nr. 18.50.02.3039

NUTZERPROFIL

- ✓ Geeignet für schwere Personen bis 200 kg
- ✓ Langzeitversorgung mit hohem Anpassbedarf für die selbstständige Mobilität
- ✓ Vorwiegend häuslicher Einsatz, aber auch in Rehakliniken zum Erreichen therapeutischer Ziele
- ✓ Einsatz bei verschiedenen Antriebsarten

MAXIMALE STABILITÄT

Der EUROCHAIR² XXL erleichtert das Fahren durch zahlreiche Einstellmöglichkeiten am Fahrwerk. Ein ergonomisch günstiger Greifwinkel entlastet die Schultergelenke. Ein verbesserter Wirkungsgrad erhöht die Selbstständigkeit und unterstützt die optimale Ausnutzung der vorhandenen Antriebskräfte. Dies führt zu einer leichteren Fortbewegung und größerer Wendigkeit. Durch Zurüstung von einer querliegenden Schiebbestange und/oder einem durchgehenden Fußbrett erhält der Nutzer größtmögliche Unterstützung bei der Sitzposition.

- Faltbar
- Besonders stabil und in 5 Sitzbreiten erhältlich
- Anpassrücken
- Trommelbremse für Begleitperson (Option)
- Auftrittshilfe serienmäßig



Durchgehendes Fußbrett



Erhöhte Stabilität durch Verwendung einer Doppelschere



Höhenverstellbares Seitenteil mit tiefeinstellbaren Armauflagen in Serie



Sitzhöhe vorne / hinten variabel:
460 – 520 mm
Sitztiefe: 430 / 460 / 490 mm

Besonders belastbar

Beinstützen abnehmbar, wegschwenkbar



Nutzergewicht bis 160 kg
(verstärkte Ausführung bis 200 kg)



Rollstuhl-Leergewicht ab 19 kg



Sitzbreiten von 480 – 650 mm



EUROCHAIR² HD 2.850

NUTZERPROFIL

- ✓ Geeignet für schwere Personen bis 300 kg
- ✓ Die Versorgung und der Transfer für Nutzer und Begleitperson wird erleichtert
- ✓ Einsatz in Alten- u. Pflegeheimen, Therapie- und Rehazentren bzw. im häuslichen Bereich zur Unterstützung therapeutischer Ziele

BESONDERE ANFORDERUNGEN

Der EUROCHAIR² HD ermöglicht eine selbstständige Fortbewegung einer schwergewichtigen Person und/oder Versorgung und Beförderung im barrierefreien Innen- und Außenbereich. Die selbstständige Mobilität wird soweit wie möglich durch gute Anpassung von Sitz, Rückenlehne und Fahrwerk an den Nutzer unterstützt. Durch die querliegende Schiebbestange und dem durchgehenden Fußbrett erhält der Nutzer größtmögliche Unterstützung bei der Sitzposition.


- Verstärkter Rücken, Sitzgurt und hintere Seitenteilaufnahme
- Faltbar
- Rahmenbau aus hochfestem Stahl
- Durchgehendes Fußbrett
- Armlehnen abnehmbar, nach hinten abklappbar
- Trommelbremse für Begleitperson
- Auftrittshilfe serienmäßig



Durchgehendes Fußbrett



Erhöhte Stabilität durch Verwendung einer Doppelschere

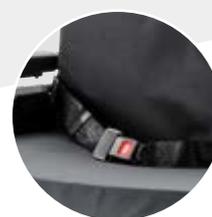

Verstärkter Sitzgurt



Sitzhöhe vorne / hinten:
500 / 475 mm oder 475 / 450 mm
Sitztiefe: 460 / 500 mm

Verstärkte Ausführung bis 300 kg Nutzergewicht im Lieferumfang enthalten:

- Verstärkter Rückengurt
- Verstärkter Sitzgurt
- Durchgehendes Fußbrett
- Trommelbremse
- Querliegende Schiebbestange



Nutzergewicht bis 300 kg



Rollstuhl-Leergewicht ab 35 kg



Sitzbreiten von 700 – 800 mm




TECHNISCHE DATEN

Maßtoleranzen ± 10 mm, ± 2°, Daten unter Vorbehalt konstruktiver Änderungen

| | SERVICE LAGERVARIANTE 3.600 | BUDGET LAGERVARIANTE 9.050 | HM303D LAGERVARIANTE 7.010 | HM03MS LAGERVARIANTE 7.010 | FORMAT LAGERVARIANTE 3.940 |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| HMV-Nr. | 18.50.02.0006 | 18.50.02.0117 | - | - | 18.50.02.2092 |
| Sitzbreite in mm | 400 / 450 ³⁾ / 480 / 510 | 380 / 400 / 430 / 460 / 480 / 510 | 450 | 450 | 380 / 400 / 430 / 460 / 480 / 510 |
| Breite fahrbereit in mm | 620 / 670 / 700 / 730 | 560 / 580 / 610 / 640 / 660 / 690 | 645 | 600 | 560 / 580 / 610 / 640 / 660 / 690 |
| Breite gefaltet in mm | 310 | 280 | - | - | 280 |
| Sitztiefe in mm | 440 | 430 | 410 | 410 | 400 – 430 |
| Sitzhöhe in mm | - | - | 450 | 465 | - |
| Sitzhöhe vorne in mm | 520 | 470 – 510 | - | - | 470 – 510 |
| Sitzhöhe hinten in mm | 490 | 440 – 490 | - | - | 440 – 490 |
| Gesamthöhe in mm | 920 | 960 | 860 | 875 | 960 |
| Rückenhöhe in mm | 400 | 420 | 400 | 410 | 420 |
| Rückenwinkel in Grad | - | - | 82° ± 1° | 82° ± 1° | - |
| Sitzkantelung in Grad | - | - | - | - | - |
| Armlehnenhöhe in mm | 240 | 210,5 | 220 | 220 | 215 |
| Fußbrettlänge in mm | - | - | 390 | 390 | - |
| Länge mit / ohne Fußstütze | 1.080 / 780 | 1.040 | 942 / - | 1.075 / - | 1.040 |
| Personengewicht in kg | 120 | 130 | 110 | 100 | 130 |
| Leergewicht in kg | 19 | 18,5 | 10 | 9,5 | 17,5 |
| Zul. Gesamtgewicht in kg | 139 | 148,5 | - | - | 147,5 |
| Transportgewicht in kg | 11 | 11,5 | - | - | 10,5 |
| Antriebsrad in mm (Zoll) | 610 (24") | 610 (24") | 22" | 12" | 610 (24") |
| Statische Stabilität (auch bei angezogener Bremse) in Grad | - | - | - | - | - |
| Bremsprüfung nach NORM in Grad | - | - | - | - | - |
| Packmaß in mm | - | - | 930 x 360 x 710 | 910 x 350 x 720 | - |

| EUROCHAIR ² LAGERVARIANTE 2.750 | EUROCHAIR ² PRO 2.850 | EUROCHAIR LAGERVARIANTE 1.750 | SOLERO LIGHT LAGERVARIANTE 9.072 | EUROCHAIR ² XXL 2.850 | EUROCHAIR ² HD 2.850 |
|--|---|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|
| 18.50.02.2122 | 18.50.02.2123 | 18.50.02.2085 | 18.50.02.7024 | 18.50.02.3039 | - |
| 380 / 400 / 430 / 460 / 480 / 500 / 530 | 300 / 320 / 340 / 360 / 380 / 400 / 430 / 460 / 480 / 500 / 530 | 380 / 400 / 430 / 460 / 480 / 500 / 530 | 430 – 460 / 480 – 510 | 480 / 500 / 530 / 580 / 650 | 700 / 750 / 800 |
| 580 / 600 / 630 / 660 / 680 / 700 / 730 | 500 / 520 / 540 / 560 / 580 / 600 / 630 / 660 / 680 / 700 / 730 | 560 / 580 / 610 / 640 / 660 / 680 / 710 | min. 620 | 680 / 700 / 730 / 780 / 850 | 920 / 970 / 1.020 |
| 310 | 310 | 280 | | 310 | 310 |
| variabel 400 – 490 | 400 / 430 / 460 / 490 | 400 – 460 | 420 – 480 | 430 / 460 / 490 | 460 / 500 |
| - | - | - | 440 / 520 | - | - |
| variabel 470 – 520 | variabel 390 – 560 | variabel 430 – 510 | - | variabel 460 – 520 | 475 / 500 |
| | variabel 390 – 520 | variabel 430 – 530 | - | variabel 460 – 520 | 475 / 450 |
| 930 | variabel 790 – 1.050 | 960 | 1.040 – 1.180 | 930 | 960 |
| 400 / 420 / 440 | 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 | 400 / 420 | 530 – 560 | 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 | 430 |
| - | - | - | 0° – 45° | - | - |
| - | - | - | (-2°) – 25° | - | - |
| 210 – 260 | 210 – 260 | ab 230 | 210 – 270 | 210 – 260 | 230 – 330 |
| - | - | - | - | - | - |
| 1.050 ⁴⁾ | 1.050 | ab 1.000 | 1.180 / 910 | max. 1.070 / max. 840 | max. 1.140 / max. 880 |
| 130 | 130 | 130 | 130 | 160 / 200 / 300 | 300 |
| 17,5 | 17,5 | 15 ⁵⁾ | 38 | 19 | 34 |
| 147,5 | 147,5 | 150 | 168 | 179 / 219 | 334 |
| - | 10 | - | 23 | 12 | 27,5 |
| 616 (24") | 22" 24" | 600 (24") | 610 (24") | 610 (24") | 610 (24") |
| - | - | - | - | - | - |
| 7° | - | 7° | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |



Ausg. 2025/01

MEYRA GmbH Kleiststraße 49 | 32457 Porta Westfalica | Deutschland
info@meyragroup.com | Tel.: +49 5733 922 - 0 | Fax: +49 5733 922 - 9311 | www.meyra.de
2025-08 Technische Änderungen unserer Produkte sowie Druckfehler
und Farbabweichungen in unseren Drucksachen behalten wir uns vor.
Ident-Nr. 261 505 600

Bildnachweis: Seite 1,14,15,24 © „Halfpoint“ – stock.adobe.com; Seite 3 © „Gorodenkoff“ – stock.adobe.com;
Seite 19 © „FredFroese“ – istockphoto.com